

ZMAN License 요청하기

1. 최신 버전의 ZMAN 소프트웨어와 LabView runtime engine 을 <http://www.zivelab.com> 또는 <http://www.wonatech.com> 에서 다운 받으십시오.

www.zivelab.com : Support – Software download

ZIVE LAB [About] [Site Map]

Home
Products
Support
News & Event
Contact

Software Download

marked link requires ID and password to download them.
If you are user and have a send serial number for ZIVELAB products, Please send the following "software request form" then we will promptly send software download FTP server's ID and password via email.
[Click here "Software Request Form"](#)
You can download other software by clicking following link.

Control/Data Acquisition Software for ZIVELAB products

- ZIVE SM software([ver6726](#)) for ZIVE SP/MP/BP/PP series with manual (60MB) [UPDATE](#)
- ZIVE Z100 Navigator software v.2.4 for Zcon/Z#/Z100 control (requires NI runtime engine 2013 32bit)
- ZIVE BM software([ver4121](#)) for BZA(Battery Impedance Analyser) series [UPDATE](#)

USB Driver / Installer

- * This driver is for ZIVE Z#,Zcon series
- [ZIVE Device Centre ver1.5 Beta6](#)
Do not use Device Center for SP1,SP2,SP5,MP1,MP2,MPS,PP1.

Data Analysis/tool Software

- [ZIVE ZMAN impedance data analysis software \(ver2.5\)](#)
- [ZIVE IVMAN DC data analysis software ver1.5](#) [UPDATE](#) Jan 2021
including;
ZIVE IVMAN Extractor module
ZIVE DA differential analysis software module
ZIVE PA Photovoltaic cell analysis software module
ZIVE PF peak find module
ZIVE TA Tafel analysis module
- [ZIVE SIM4U digital CV simulation software \(Freeware\)](#)[Oct 16, 2017](#)
- [ZIVE Pathfinder software for EIS data file finding](#)
- [ZIVE Data Manager software ver1.28](#) [July 20, 2021](#) [UPDATE](#)
* Above softwares needs **32bit Labview runtime engine 2013** even if your OS is 64bit.
64bit Labview runtime is not available for these softwares.
[LabVIEW RTE 2013 \(32 bit\): http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2013/4059/en/](http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2013/4059/en/)
(copy the link and paste it into the URL bar.)
* **ZMAN/IVMAN/SIM4U** software needs **Microsoft .NET framework4**.
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718>

Support

원아테크 지원

· 응용자료
· 논문/자료집
· 소프트웨어 다운로드
· 매뉴얼 다운로드
· Q&A
· (주)원아테크 생산품 카탈로그
· ZIVELAB 개발품 카탈로그
· 동영상 자료

소프트웨어 다운로드

Support | 소프트웨어 다운로드

Software Download

표시된 소프트웨어 다운로드를 하기 위해서는 ID와 패스워드가 필요합니다.
(주)원아테크 제품 사용자이시면 영업담당자에게 연락하시어 아이디와 패스워드를 요청하시기 바랍니다. 또는 아래 소프트웨어 신청서를 작성하시어 보내주시면 조속히 연락드리도록 하겠습니다.

여기를 클릭해 주십시오 "소프트웨어 신청서"

아래 필요한 소프트웨어를 클릭하시면 아이디와 패스워드를 입력하게 되어 있으니 입력하시면 다운로드 받으실수 있습니다. 불필요한 자료는 아이디와 패스워드 필요없이 다운로드 받으실수 있습니다

Control/Data Acquisition Software for ZIVELAB products

- ZIVE SM software(ver6726) for ZIVE SP/MP/BP/PP series with manual (60MB) [UPDATE](#)
- ZIVE Z100 Navigator software v.2.4 for Zcon/Z# /Z100 control. (requires NI runtime engine 2013 32bit)
- ZIVE BM software(ver4121) for BZA(Battery Impedance Analyser) series [UPDATE](#)

USB Driver / Installer


- * This driver is for ZIVE Z#,Zcon series
- ZIVE Device Centre ver1.5 Beta6
- Do not use Device Center for SP1,SP2,SP5,MP1,MP2,MP5,PP1.

Data Analysis/tool Software


- ZIVE ZMAN impedance data analysis software (ver2.5)**
- ZIVE IVMAN DC data analysis software ver1.5 [UPDATE](#) Jan 2021
including:
 - ZIVE IVMAN Extractor module
 - ZIVE DA differential analysis software module
 - ZIVE PA Photovoltaic cell analysis software module
 - ZIVE PF peak find module
 - ZIVE TA Tafel analysis module
- ZIVE SIM4U digital CV simulation software (Freeware) [Oct 16, 2017](#)
- ZIVE Pathfinder software for EIS data file finding
- ZIVE Data Manager software ver1.28 [July 20, 2021](#) [UPDATE](#)
 - * Above softwares needs 32bit Labview runtime engine 2013 even if your OS is 64bit. 64bit Labview runtime is not available for these softwares.
 - LabVIEW RTE 2013 (32 bit): <http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2013/4059/en/>**
 - (copy the link and paste it into the URL bar.)
 - * ZMAN/IVMAN/SIM4U software needs Microsoft .NET framework4.
 - <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718>

주의 사항 : ZMAN 소프트웨어는 사용하고자 하는 1대의 PC에 대해 라이선스를 발급하게 됩니다.
아래 정보는 ZMAN 을 설치하실 PC 에서 작업을 수행하여 주십시오.

2. ZMAN 소프트웨어를 다운 받으셨으면 프로그램을 실행시키십시오.

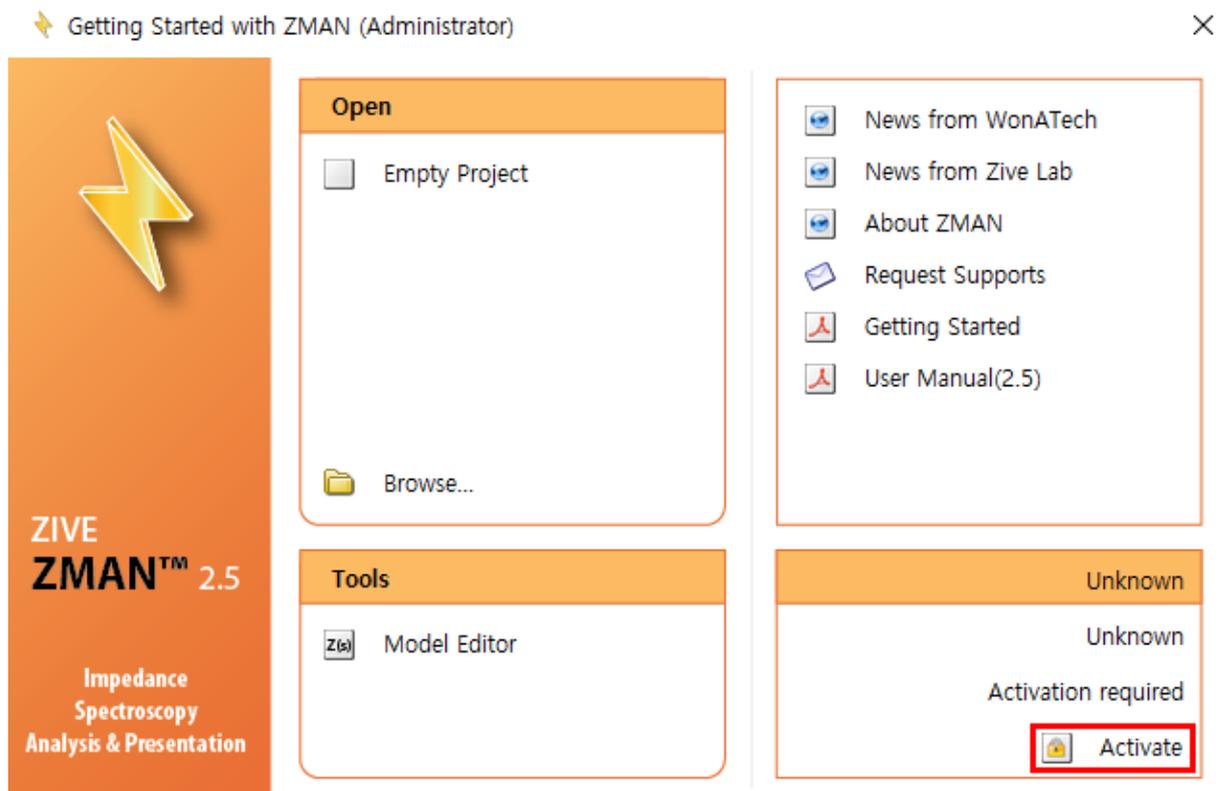

3. 위 빨간 박스의 "Activate" 버튼을 누르시면 라이선스를 요청하는 창이 열립니다.
"Request Code" 버튼을 누르십시오.

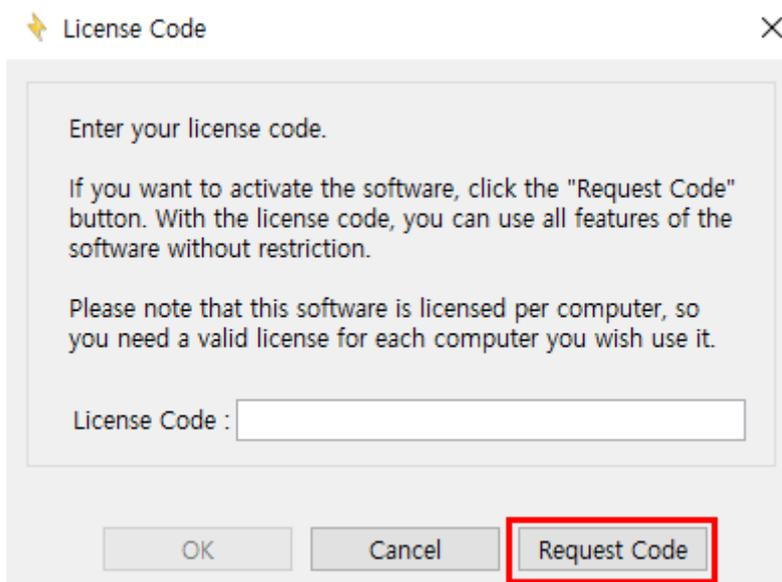

4. 라이선스 발급을 위해 아래의 정보를 입력하여 주십시오.
입력이 완료되면 “OK” 버튼을 누르십시오.

⚡ User Info ✕

* Required

*First Name	*Last Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>
*E-Mail Address	
<input type="text"/>	
*Phone Number	Fax Number
<input type="text"/>	<input type="text"/>
*Company/Institute	Department
<input type="text"/>	<input type="text"/>
*Street Address 1	
<input type="text"/>	
Street Address 2	
<input type="text"/>	
*Country	*Zip/Postal Code
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Note	
<input type="text"/>	

Your right to privacy is a priority to us. We recognize your need for reasonable control of information that you share with us. Therefore, this statement is a corporate-wide guideline, and is not limited to our online business. We do not sell your information to outside organizations. Our goal in gathering information is to consistently improve our relationship with you, our customer.

5. "Send Email" 버튼을 누르시거나 인터넷이 연결되어 있지 않은 경우 아래의 내용을 복사하신 후 sales@wonatech.com으로 보내 주십시오.

⚡ User Info ✕

Please e-mail the followings to your sales representative (sales@wonatech.com). You will receive an e-mail with a valid license code from the representative.



You can also find it in the clipboard. Please paste(CTRL-V) it in any text editor and e-mail it later.

Product: ZMAN2.5

~~Host Name: DESKTOP-DANN020~~
~~Host ID: F16B-D84E-7650-6856~~

First Name: test
Last Name: test
E-Mail Address: test@test.com
Phone Number: 1111-111-1111
Fax Number:
Company/Institute: test
Department:
Street Address1: test
Street Address2:
Zip/Postal Code: 1111
Country: korea
Serial Number:

6. 라이선스는 이메일로 발송해 드리며 라이선스를 받으신 후 ZMAN 소프트웨어를 사용하기 위해 이전 단계 3에서 발급받으신 라이선스를 입력 후 OK 버튼을 클릭하십시오.

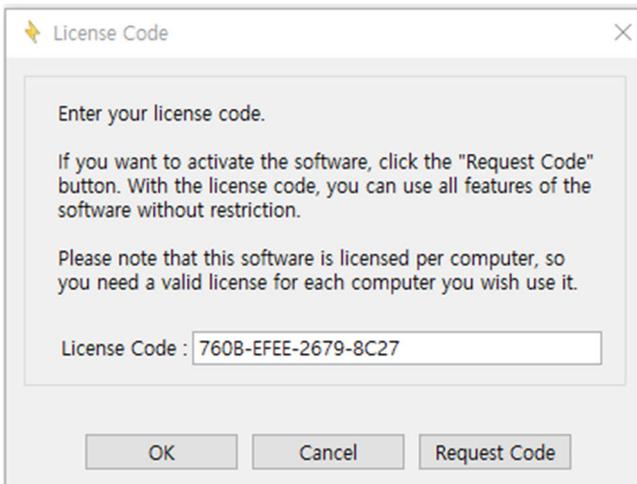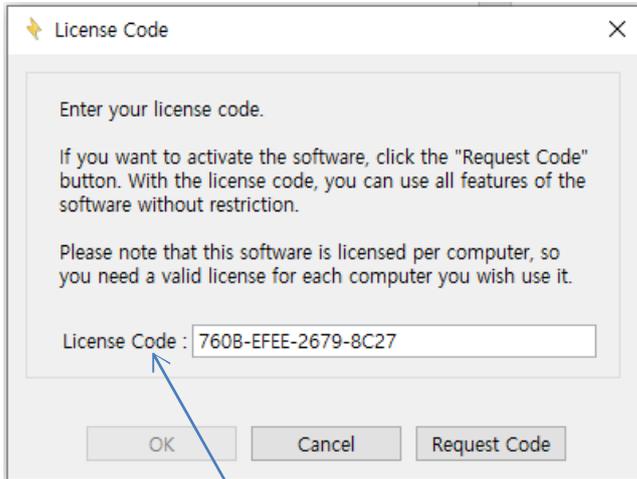

7. 이제 ZMAN 소프트웨어를 이용하실 수 있습니다.

