

CCK1标准型带选配件FSH2 &温度计

CCK系列腐蚀电解池组件的核心是基于一个标准玻璃反应瓶，1升或100ml。所有润湿部件均由耐化学腐蚀的材料(如Teflon、Pyrex和SUS 316)制成。

标准的电解池配置由柱状金属样品工作电极、石墨棒对电极、气体鼓泡管和鲁金作毛细管中的参比电极组成。

石墨棒作为对电极，参比电极和平板样品支架作为选配件可以单独订购。还提供水浴夹套式腐蚀电解池组件，以及Teflon材料制成的耐碱性电解池组件。



FSH2(平板样品支架)



WCCK1(水浴夹套式电解池)

技术规格

尺寸		
瓶容积		1升
样品容积		约750 ml
尺寸		约14cm直径, 30cm高 包括电极和适配器
柱状样品支架材料		
管		Pyrex, Ø1/4"
压缩垫片		Teflon®
柱状金属样品		钢
参比电极 (选购)		
类型		SCE或Ag/AgCl参比电极
尺寸		9 mm外径
对电极 (选购)		
类型		高密度石墨棒
尺寸		6 mm直径, 30 cm长
化学相容性		
润湿材料		Pyrex®, Teflon®
非润湿材料		包括以上材料, 外加不锈钢和Viton®
平板样品支架 (选购)		
样品直径		15.5mm ~ 22mm
样品厚度		0.3~5.8mm

内含部件

1. 电解池		Pyrex®, O形圈烧杯, 1L, Ø103(OD)*157(H)
2. 柱状金属样品 & 管		钢 / 石英管, Ø6.35* Ø4.35
3. 电解池螺丝钳		不锈钢
4. 鲁金毛细管		Pyrex®
5. 气体鼓泡管		Pyrex®
6. 电解池盖		Teflon®
7. 其它如塞子 / O形圈	g	MC Nylon® / Viton®

选购件

1. 平板样品支架		FSH2
2. 石墨棒对电极		GR002
30cm长, 6mm外径		
3. 饱和甘汞参比电极		KS1001
4. Ag/AgCl参比电极		KS1004

(其它替换部件请联系经销商。)

其它CCK/WCCK系列产品

1. CCK01/WCCK01

- 玻璃池容积：100ml
- 包括：玻璃池，Teflon池盖，电解池螺丝钳，
气体鼓泡管，塞子，等
- 部件编号：标准型：CCK01
水浴夹套式：WCCK01



CCK01

2. CCK02/WCCK02


- 玻璃池容积：200ml
- 包括：玻璃池，Teflon池盖，电解池螺丝钳，
鲁金毛细管，气体鼓泡管，
柱状样品支架，塞子，
等
- 部件编号：标准型：CCK02
水浴夹套式：WCCK02



WCCK02的玻璃池

3. CCK05/WCCK05

- 玻璃池容积：500ml
- 包括：玻璃池，Teflon池盖，电解池螺丝钳，
鲁金毛细管，气体鼓泡管，
柱状样品支架，塞子，
等
- 部件编号：标准型：CCK05
水浴夹套式：WCCK05

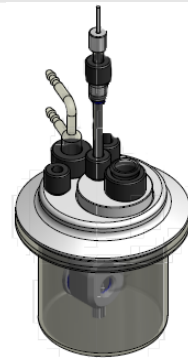

CCK05带FSH2(选购件)

WonATech Co., Ltd.

7 Neunganmal 1-gil, Seocho-gu., Seoul, 06801, Korea
Tel) +82-2-578-6516, Fax) +82-2-576-2635
e-mail: sales@wonatech.com
website : www.wonatech.com | www.zivelab.com

上海安赞商贸有限公司

上海市美艾路198号10-102室
Tel: +86-21-5275 1994 Fax: +86-21-5275 3613
Email: info@anzinc.com
Web: www.anzinc.com