


PTC1型片状样品电解池组件设计用于评价片状材料，例如金属取样片，半导体片等。测试时，试样片放置于两个电解池块之间。对电极(石墨棒或铂丝型)和参比电极需要单独购买。

- PTC1有一个电极支架部分，溶液块部分，底座块部分和一个厚度调节旋钮。
- PTC1的底座块可以让整个电解池更稳定。
- PTC1不需要修改试样片的尺寸。
- PTC1的活性面积(暴露于电解液中的部分)可以通过O形圈的位置二选一。

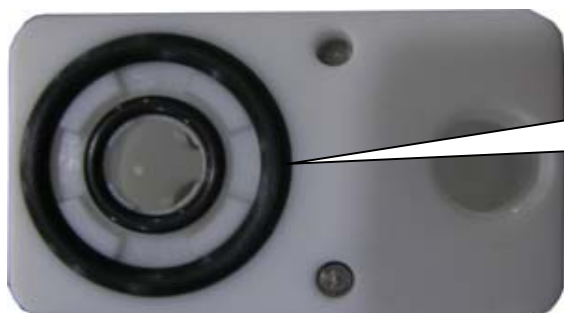

O形圈的位置决定样品的活性面积

技术规格

样品尺寸

试样片尺寸

宽度: >15mm, 厚度: 0.1~10mm

材料

电解池底座

Teflon®

电解池体

Teflon®

O形圈

Viton®

活性面积

使用小O形圈

1cm²

使用大O形圈

5cm²

选购件

1. 石墨棒对电极 GR002H

外径:1/4", 长度: 6"

铂丝对电极

CHI115

铂丝对电极

002222

2. 饱和甘汞参比电极

9mm外径, KT玻璃熔接

1001

饱和甘汞参比电极

6mm外径, 陶瓷熔接

013458

3. Ag/AgCl参比电极

6mm外径, 多孔玻璃

012167

Ag/AgCl参比电极

6mm外径, 多孔玻璃

013429

Ag/AgCl参比电极

9mm OD, KT玻璃熔接

1004

(其它替换部件请联系经销商。)

WonATech Co., Ltd.

7 Neunganmal 1-gil, Seocho-gu., Seoul, 06801, Korea
Tel)+82-2-578-6516, Fax)+82-2-576-2635
e-mail: sales@wonatech.com
website : www.wonatech.com | www.zivelab.com

上海安赞商贸有限公司

上海市美艾路198号10-102室
Tel: +86-21-5275 1994 Fax: +86-21-5275 3613
Email: info@anzinc.com
Web: www.anzinc.com