

평판 시편용 부식 셀 (PTC1)

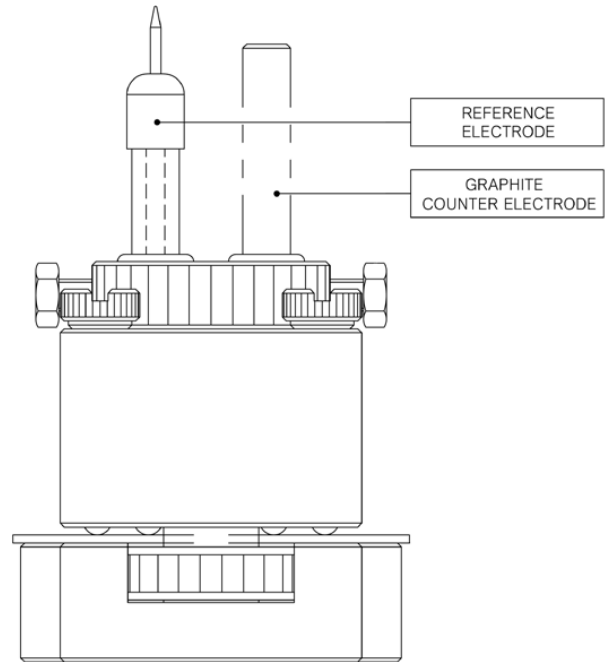


Plate Test Cell Kit (PTC1)은 금속, 반도체 판 등과 같은 평판 재료를 평가하기 위해 설계되었습니다. 평가 시 샘플 평판은 두 셀 블록 사이에 배치됩니다. 상대 전극(흑연 막대 또는 Pt 와이어 유형)과 기준 전극은 별도로 주문해야 합니다.

- PTC1은 전극 홀더 부분, 용액 블록 부분, 바닥 블록 부분 그리고 두께 조절용 다이얼 노브를 포함하고 있습니다
- PTC1의 바닥 블록은 안정적으로 세울 수 있습니다.
- PTC1은 샘플 평판의 크기를 변경할 필요가 없습니다.
- PTC1의 샘플 활성 영역(전해질에 노출되는 부분)은 O-링을 선택함으로써 두가지 크기 중에서 선택할 수 있습니다.



O-링 위치는 샘플의 활성 영역을 결정합니다.

사양

샘플 크기

평판 크기	너비: >15mm, 두께: 0.1~10mm
용량	약 7.5ml

재질

셀 바닥	Teflon®
셀 바디	Teflon®
오링	Viton®

활성 영역

작은 오링 사용 시	1cm ²
큰 오링 사용 시	5cm ²

전극 홀

0.6mm 직경	1개
1.7mm 직경	1개
6.4mm 직경	1개
9.2mm 직경	1개

옵션 품목

- | | |
|--|--------|
| 1. Graphite Rod, Counter Electrode | GR002H |
| OD:1/4", Length : 6" | |
| Pt Wire Type Counter Electrode | CHI115 |
| 2. Saturated Calomel Reference Electrode | 1001 |
| 9mm OD, KT glass frit | |
| 3. Ag/AgCl Reference Electrode | 1004 |
| 9mm OD, KT glass frit | |

(다른 교체 부품에 대해서는 폐사로 문의하십시오.)



(주)원아테크
서울시 서초구 능안말 1길 7
우)06801

전화: 02-578-6516 팩스: 02-576-2635

이메일 sales@wonatech.com

공식웹: www.wonatech.com | ZIVELAB웹: www.zivelab.com | 온라인장터웹: www.electrochemistry.co.kr | 수입품웹: www.qrins.com